

Kliininen kemia ja mikrobiologia

27.1.2023

**Virtsanäytteenotto, tutkimukset U-KemSeu, U-Solut, U-BaktVi
(säilöntäaineelliset putket)**

Näytteenottotarvikkeet saat mistä tahansa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen laboratorion toimipisteestä.

Tarkista näytteenottoputkien päiväys. Älä käytä vanhentuneita näytteenottoputkia. Ota virtsanäyte siten, että edellisestä virtsaamisesta on kulunut vähintään 4 – 6 tuntia. Vältä runsasta veden juomista, jotta virtsasta ei tulisi liian laimeaa. Yölevon jälkeinen aamunäyte on suotava, koska fyysinen rasitus saattaa vaikuttaa virtsan koostumukseen. Kuukautisten aikana virtsanäytteenottoa tulee välttää.

Virtsanäytteenotto aikuisilla

Ota virtsanäyte seuraavalla sivulla olevan ohjeen mukaisesti.

Virtsanäytteenotto lapsilla

Leikki-ikäisiltä lapsilta saat näytteen kiinnittämällä näyteastian potan etuosaan, jolloin luonnostaan voimistuva virtsasuihku osuu astiaan virtsaamisen keskivaiheilla. Imeväisikäisten näytteenottoa varten pyydä näytteenottovälineet ja – ohjeet laboratorion toimipisteestä.

Virtsanäytteen kuljetus

Toimita näyteputket mahdollisimman pian (saman aamupäivän kuluessa) huoneenlämmössä, muovipussiin pakattuna lähimpään Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen laboratorion toimipisteeseen (samaa paikkaan, missä mahdolliset verinäytteet otetaan).

Palauta tämä ohje näytteen mukana ja täydennä näytetiedot:

Nimi _____




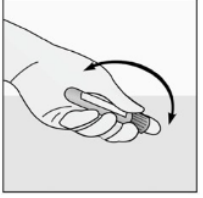
Sosiaaliturvatunnus _____

Edellisestä virtsaamisesta on kulunut ___ tuntia.

Otit virtsanäytteen _____ / _____ 20_____ klo _____

Antibioottihoito? Kyllä/Ei. Mikä? _____ Aloituspäivä: _____

Virtsanäytteenotto ohjainpurkin avulla

<p>1. Näytteenottovälineet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Näyteastia Kannen suojateipin alla on näyteohjain, jossa on näyteneula. Tyhjiöputki (1 - 2 kpl) <p>Huom! Tyhjiöputken korkkia ei saa avata.</p>	
<p>2. Näytteenotto</p> <ul style="list-style-type: none"> Pese kädet. Tee alapesu. Levitä häpyhuulet erilleen tai vedä esinahka taakse. Pese ulkosynnyttimet/terska ilman saippuaa käsisuihkulla. Jos käytät pesuun veteen kastettua wc-paperia, käytä yhtä paperia vain kerran. Toista pesu ainakin neljä kertaa. Kuivaa lopuksi wc-paperilla tai kertakäyttöpyyhkeellä. Avaa näyteastian kierrekannellinen kansi. Aloita virtsan laskeminen ensin WC-pönttöön, jotta alkusuihkussa mukana tulevat virtsaputken suun bakteerit eivät tule näytteeseen. Vie virtsasuihkua katkaisematta näyteastia virtsasuihkun alle, ota n.2/3 astian tilavuudesta näytettä ja laske loppuvirtsa WC-pönttöön. Sulje purkin kansi tiukasti. 	
<p>3. Näytteen siirto putkeen</p> <ul style="list-style-type: none"> Avaa purkin kannessa oleva teippi. Paina näyteputki korkki edellä näyteohjaimen neulaa vasten pohjaan saakka. Paina näyteputkea pohjaa vasten kunnes se on täyttynyt virtsalla. Kun putki on täynnä, poista se ohjaimesta. 	
<p>4. Putken käsittely</p> <ul style="list-style-type: none"> Sekoita putki kääntämällä sitä ylösalaisin 8 - 10 kertaa. Kiinnitä mahdollinen nimitarra putkitarran päälle pitkittäin. Toimita putki laboratorioon huoneenlämmössä mahdollisimman pian. 	
<p>5. Hävitä näytepurkki varovaisuutta noudattaen kodin sekajätteissä.</p>	