




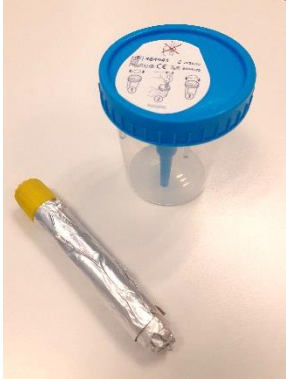





Tutkimus		Näytteenottoastia	Näytteen säilytyspaikka ja muut huomiot
<p><b>U-Alb (1029)</b> Albumiini, virtsasta</p> <p><b>U-AlbKre (4511)</b> Albumiinin ja kreatiniinin suhde, virtsasta</p> <p><b>U-Amyl (1080)</b> Amylaasi, virtsasta</p> <p><b>U-Ca (2016)</b> Kalsium, virtsasta</p> <p><b>U-Pi (1433)</b> Fosfaatti, virtsasta</p> <p><b>U-Gluk (1475)</b> Glukoosi, virtsasta</p> <p><b>U-GAG-O (1498)</b> Glykosaminoglykaanit, kval.,virtsasta</p> <p><b>U-hCGO-LB (2124)</b> Koriongonadotropiini, virtsasta, vieritesti lab</p> <p><b>U-HOP (8024)</b> Hydroksipropiini, virtsasta</p> <p><b>U-LZM (2290)</b> Lysotsyymi, virtsasta</p> <p><b>U-Na (2386)</b> Natrium, virtsasta</p> <p><b>U-Osmol (2444)</b> Osmolaliteetti, virtsasta</p>	<p><b>U-Oligs-O (4861)</b> Oligosakkaridit, kval.,virtsasta</p> <p><b>U-Orotaat (4248)</b> Orotaatti virtsasta</p> <p><b>U-Prot (2519)</b> Proteiini, virtsasta</p> <p><b>U-Prot-Fr (2523)</b> Proteiini, fraktiot, virtsasta</p> <p><b>U-ImmFix (3402)</b> Immunofiksaatiotutkimus, virtsasta</p> <p><b>U-PKU-O (8307)</b> Fenylketonuria, seulonta</p> <p><b>U-ProtKre (4712)</b> Proteiinin ja kreatiniinin suhde, virtsasta</p> <p><b>U-Urea (2890)</b> Urea, virtsasta</p> <p><b>U-K (2004)</b> Kalium, virtsasta</p> <p><b>U-Krea (2145)</b> Kreatiniini, virtsasta</p>	<p>Virtsakeräysastia vakuumputkille 120 ml, Virtsanäyteputki vakuumi, 10 ml lisäaineeton</p>  <p>putki voi olla ulkonäöltään myös:</p> 	<p>Säilytys jääkaapissa.</p> <p>Toimitettava laboratorioon mahdollisimman pian.</p> <p><b>U-AlbKre:</b> Näytteeksi sopii ainoastaan <b>aamuvirtsa</b>.</p> <p><b>U-Oligs-O:</b> pH:n säätäminen (HCl) ennen lähetystä &lt; 3.</p> <p><b>U-HOP, U-PKU-O ja U-GAG-O, U-Orotaat:</b> näytteen pakastus laboratorioissa ja lähetys pakastettuna</p> <p>Potilasohje: <b>2162-2011-P</b></p>


<p><b>U-Aminoh (1062)</b> Aminohapot, virtsasta <b>U-Orgah (4855)</b> Orgaaniset hapot, virtsasta</p>	<p>Virtsakeräysastia vakuumiputkille 120 ml, Virtsanäyteputki vakuumi, 10 ml lisäaineeton</p> 	<p>Näyte tulee toimittaa <b>heti</b> laboratorioon.</p> <p><b>Pakastus tunnin</b> sisällä näytteenotosta.</p> <p>Potilasohje: <b>2162-2011-P</b></p>
<p><b>U-Hemsi-O (1572)</b> Hemosideriini, kval., virtsasta</p>	<p>Virtsakeräysastia vakuumiputkille 120 ml, Virtsanäyteputki vakuumi, 10 ml lisäaineeton</p> 	<p>Virtsamäärä vähintään 50 ml, aamuvirtsaa.</p> <p>Näytteestä soitettava laboratorioon ennen näytteen tuontia, klo 12 mennessä.</p> <p>Ei sovellu hajautettuun näytteenottoon.</p>
<p><b>U-B2Miglo (1172)</b> Beeta-2-mikroglobuliini</p>	<p>Virtsakeräysastia vakuumiputkille 120 ml, Virtsanäyteputki vakuumi, 10 ml lisäaineeton</p> 	<p>Näyte annetaan laboriokäynnillä. Näytteeksi 2-3 tuntia rakossa ollutta virtsaa, ei aamuvirtsaa. Ph:n säätö heti näytteenoton jälkeen.</p>



<p><b>U-PBG (2486)</b> Porfobilinogeeni, virtsasta <b>U-Porf-O (2493)</b> Porfyriinit, kval., virtsasta</p>	<p>Virtsakeräysastia vakuumiputkille 120 ml, Virtsanäyteputki vakuumi, 10 ml <b>lisäaineeton</b></p> 	<p>Suojataan valolta!</p>
<p><b>U-Kemseul (1881)</b> Kemiallinen seulonta, virtsasta <b>U-Solut (1940)</b> Solut (analysaattori), virtsasta <b>U-BaktVi (1155)</b> Bakteeriviljely, virtsasta <b>U-Diffi (1941)</b> Virtsan solut, erittelylaskenta</p>	<p>Virtsakeräysastia vakuumiputkille 120 ml, Virtsanäyteputki vakuumi x 2, 10 ml <b>lisäaineellinen.</b> (U-BaktVi-putki 4/10 ml <b>lisäaineellinen</b>)</p> 	<p>Säilytys huoneenlämmössä. Toimitettava laboratorioon mahdollisimman pian, saman aamupäivän kuluessa.</p> <p>Potilasohje: <b>2162-2011-P</b></p>

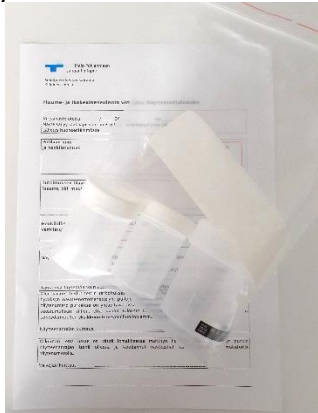

<p><b>U-Syto (9063)</b> Virtsan irtosolututkimus, näytteenotto</p>	<p>Näyteastia, 100 ml</p> 	<p>Säilytys huoneenlämmössä.</p> <p>Toimitettava laboratorioon <b>tunnin sisällä</b> näytteenotosta.</p> <p>Potilasohje: <b>4183-2010-P</b></p>
<p><b>U-Huume-O (4221)</b> Huume- ja lääkeaineseulonta, kval., virtsasta <b>U-HuumTOF (8817)</b> Laaja huumeeseulonta, ei varmistuksia <b>U-HuumL-O (1872)</b> Huume- ja lääkeaineseulonta ja varmistus, laaja (kval.)</p>	<p>Näytesetti, näytteenottolomake</p> 	<p>Säilytys jääkaapissa.</p> <p>Näytteenotto valvotusti.</p> <p>Näytteenottolomake toimitettava näytteiden mukana laboratorioon.</p>

<p><b>U-Huum-Op (9201)</b> Huume- ja lääkeaineseulonta, päivystysnäyte</p>	<p>Näyteastia, näytteenantolomake</p> 	<p>Näytteenottolomake toimitettava näytteiden mukana laboratorioon.</p>
<p><b>cU-Alb-Mi (4084)</b> Mikroalbuminuria, yövirtsan keräys</p> <p><b>cU-IgG (4751)</b> Immunoglobuliini G, yövirtsasta</p> <p><b>cU-Gluk (1463)</b> Glukoosi, yövirtsan keräys</p> <p><b>cU-A1-Miglo (4755)</b> Alfa-1-mikroglobuliini, yövirtsasta</p>	<p>Virtsankeräysastia näytteensiirtokärjellä, 3 L</p> 	<p>Säilytys pimeässä, viileässä.</p> <p>Toimitettava laboratorioon mahdollisimman pian.</p> <p>Keräysaika vähintään 6 h.</p> <p>Potilasohje: <b>2156-2011-P</b> (cU-Alb-Mi, cU-IgG) <b>4347-2016-P</b> (cU-Gluk, cU-A1-Miglo)</p>
<p><b><u>Ilta/yövirtsaeräys</u></b> <b><u>(säilöntäaineeton)</u></b></p> <p><b>nU-Dala (6331)</b> delta-aminolevulinaatti, yövirtsasta</p> <p><b>nU-PBG (6330)</b> porfobilinogeeni, yövirtsasta</p> <p><b>nU-Porf (6332)</b> porfyriinit, yövirtsasta</p>	<p>Virtsankeräysastia näytteensiirtokärjellä, 3 L</p> 	<p>Säilytys pimeässä, viileässä.</p> <p>Toimitettava laboratorioon mahdollisimman pian.</p> <p>Keräysaika vähintään 6 h.</p> <p>Potilasohje: <b>4345-2016-P</b></p>

## Vuorokausivirtsan keräys (säilöntäaineeton)

<p><b>dU-Aldos (1033)</b> Aldosteroni vuorokausivirtsasta <b>dU-Ca (2011)</b> Kalsium vuorokausivirtsasta <b>dU-Cl (2077)</b> Kloridi vuorokausivirtsasta, <b>dU-Cu (2169)</b> Kupari vuorokausivirtsasta <b>dU-Gluk (1465)</b> Glukoosi vuorokausivirtsasta <b>dU-IgLc (1681)</b> Immunoglobuliini, kevyet ketjut, vuorokausivirtsasta <b>dU-IgLcK (3832)</b> Immunoglobuliini, kevyt lambda, vuorokausivirtsasta <b>dU-IgLcL (8333)</b> Immunoglobuliini, kevyt kappa, vuorokausivirtsasta <b>dU-ImmFix (3403)</b> Immunofixaatiotutkimus vuorokausivirtsasta <b>dU-K (1994)</b> Kalium vuorokausivirtsasta <b>dU-Karni (4229)</b> Karnitiini vuorokausivirtsasta <b>dU-Kors-V (2130)</b> Kortisoli, vapaa, vuorokausivirtsasta</p>	<p><b>dU-Krea (2141)</b> Kreatiiniini vuorokausivirtsasta <b>Pt-Krea-Cl (2146)</b> Kreatiiniinin poistuma <b>dU-Mg (2299)</b> Magnesium vuorokausivirtsasta <b>dU-Na (2376)</b> Natrium vuorokausivirtsasta <b>dU-Oligs (3461)</b> Oligosakkaridit vuorokausivirtsasta <b>dU-Oksal (2421)</b> Oksalaatti vuorokausivirtsasta <b>dU-Pregnt (2497)</b> Pregnantrioli vuorokausivirtsasta <b>dU-Pi (1429)</b> Fosfaatti vuorokausivirtsasta <b>dU-Prot (2513)</b> Proteiini vuorokausivirtsasta <b>dU-Prot-Fr (2520)</b> Proteiini, fraktiot, vuorokausivirtsasta <b>dU-Sitraat (4166)</b> Sitraatti vuorokausivirtsasta <b>dU-Uraat (2883)</b> Uraatti vuorokausivirtsasta <b>dU-Urea (2887)</b> Urea vuorokausivirtsasta <b>dU-Zn (2637)</b> Sinkki vuorokausivirtsasta</p>	<p>Virtsankeräysastia näytteensiirtokärjellä, 3 L (x 2)</p> 	<p>Säilytys pimeässä, viileässä. Toimitettava laboratorioon mahdollisimman pian.  Potilasohjeet: <b>4348-2016-P</b> (dU-Aldos) <b>4346-2016-P</b> (dU-Aminoh,-Ca, -Cl, -Cu, -Gluk, -IgLC, -IgLCk, -IgLCl, -ImmFix, -K, -Karni, -Krea, -Mg, -Na, -Oligs, -Pregnt, -Pi, -Prot, -Prot-Fr, -Sitraat, -Urea, -Zn) <b>4346-2016-P</b> (dU-Kors-V) <b>2160-2011-P</b> (dU-Krea-Cl) <b>4343-2016-P</b> (dU-Oksal) <b>4344-2016-P</b> (dU-Uraat)</p>
---	--	---	---

<b><u>Vuorokausivirtsan keräys (säilöntäaineellinen)</u></b>			
<p><b>dU-Adr (1016)</b> Adrenaliini vuorokausivirtsasta</p> <p><b>dU-Noradr (2404)</b> Noradrenaliini vuorokausivirtsasta</p> <p><b>dU-Dopam (1264)</b> Dopamiini vuorokausivirtsasta</p> <p><b>dU-Normet (2406)</b> Normetanefriini vuorokausivirtsasta</p> <p><b>dU-HVA (1634)</b> Homovanillinaatti vuorokausivirtsasta</p>	<p><b>dU-5HIAA (1637)</b> Hydroksi-indolyyliasettaatti vuorokausivirtsasta</p> <p><b>dU-Metnef (2336)</b> Metanefriini vuorokausivirtsasta</p> <p><b>dU-MOMA (2345)</b> Metoksihydroksimandelaatti vuorokausivirtsasta</p> <p><b>dU-MTA (3873)</b> Metoksityramiini vuorokausivirtsasta</p>	<p>Virtsankeräysastia näytteensiirtokärjellä, 3 L (x 2) + HCl 2 x 5ml</p> 	<p>Säilytys pimeässä, viileässä.</p> <p>Toimitettava laboratorioon mahdollisimman pian.</p> <p>Jos virtsaa kertyy yli 3 litraa ja keräystä joudutaan jatkamaan uuteen keräysastiaan, ohjeista potilasta kaatamaan puolet jo kerätystä virtsasta toiseen keräysastiaan ja jatkamaan keräystä alkuperäiseen astiaan. Molemmat astiat palautetaan laboratorioon.</p> <p>Potilasohje: <b>2157-2011-P</b> (dU-Adr, -Noradr, -Dopam)</p> <p><b>2158-2011-P</b> (dU-HVA, -Metnef, -Normet, -MOMA, -MTA)</p> <p><b>2159-2011-P</b> (dU-5HIAA)</p>
<p><b>Sa-Korsol (8698)</b> Kortisoli, syljestä</p>		<p>Salivette Cortisol keräysputki</p> 	<p>Säilytys jääkaapissa.</p> <p>Näytteenotto klo 23-24.</p> <p>Potilasohje: <b>5742-2018-P</b></p>

<p><b>F-Calpro (4803)</b> Kalprotektiini, ulosteesta <b>F-Elast1 (1718)</b> Elastaasi 1, ulosteesta</p>	<p>Ulostenäytepurkki 25 ml, lusikallinen</p> 	<p>Säilytys jääkaapissa.</p> <p>Potilasohje: <b>2161-2011-P</b></p>
<p><b>F-Hb-O (3181)</b> Hemoglobiini (kval), ulosteesta <b>F-Hb-O2 (8173)</b> Hemoglobiini (kval), ulosteesta, toinen näyte <b>F-Hb-O3 (8174)</b> Hemoglobiini (kval), ulosteesta, kolmas näyte</p>	<p>Näytteenottoputki, sisältää laimennosliuosta</p> 	<p>Jääkaappisäilytys max 5 vrk.</p> <p>Potilasohje: <b>5552-2018-P</b></p>